


JOOGIVEE/KRAANIVEE PROOVIDE VÕTMINE



1. Eemaldada kraani otsik ja lisadetailid.
Pühkida kraan puhtaks.




4. Avada kraan maksimaalse vooluga 5-10 sek,
seejärel keerata poole vooluni.

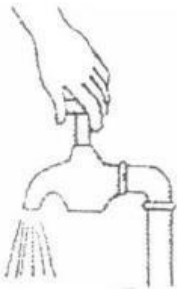

2. Avada kraan poolenisti ning lasta veel voolata
ühtlase veetemperatuuri saavutamiseni.



5. Avada steriilne pudel ning vältida korgi
saastumist

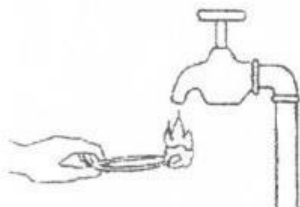

3. Kraan steriliseerida leegiga



6. Pudel täidetakse:
* mikrobioloogia (MV) jätta ~2cm õhuruumi
* keemia – korgini
Pudel sulgeda koheselt pärast täitmist.

Kui kliendil on mitte kuumutamist taluv kraan, siis teha puhastust vaid lahjendatud etanoriga (piiritusega)

TARTU KONTOR

Rehepapi tee 31
Soinaste küla, Kambja vald
61709 Tartumaa

TALLINNA KONTOR

Nuia 16-2
Lasnamäe
11415 Tallinn

+372 736 2633
+372 506 6775
miridon@miridon.ee
www.miridon.ee

MIRIDON OÜ

Reg nr: 10288255
KMKR: EE100039450
IBAN: EE942200001120195726

